

# Basic



SEMPLICEMENTE SVIZZERA



Basic – Pompa di aspirazione chirurgica

# Basic


## La pompa di aspirazione con l'ingegno e la semplicità svizzeri

**Aspirazione affidabile e semplice in modo igienico.** La pompa Basic è una pompa di aspirazione semplice e affidabile per tutte le applicazioni ospedaliere, cliniche o ambulatoriali che richiedono un'impostazione ad alto vuoto, tra cui endoscopia, aspirazione delle vie aeree, parto cesareo/assistito e drenaggio delle ferite.

**Privilegiamo la semplicità.** Durante lo sviluppo della pompa di aspirazione Basic, Medela ha cercato la semplicità. La pompa può essere accesa sia con l'interruttore a pedale integrato nel carrello sia toccando il pulsante sull'involucro. Per regolare il vuoto, è presente l'intuitivo regolatore a membrana. Sono disponibili accessori opzionali da collegare per soddisfare le vostre esigenze. La struttura interna semplificata riduce al minimo lo sforzo richiesto per i controlli di routine, permettendo il risparmio sui costi.

**Funziona quando e come serve.** L'ingegno svizzero di Medela ha saputo creare pompe famose per la lunga durata utile. Il know-how dell'azienda, materiali resistenti e una configurazione intelligente contribuiscono all'affidabilità della pompa di aspirazione Basic.

**Una risposta alle preoccupazioni igieniche.** Le preoccupazioni per l'igiene hanno influito sia sul design sia sulla funzionalità della pompa di aspirazione Basic e dei suoi accessori opzionali. Medela ha prestato la massima attenzione alla posizione e al design degli elementi operativi per ridurre i potenziali rischi di contaminazione.

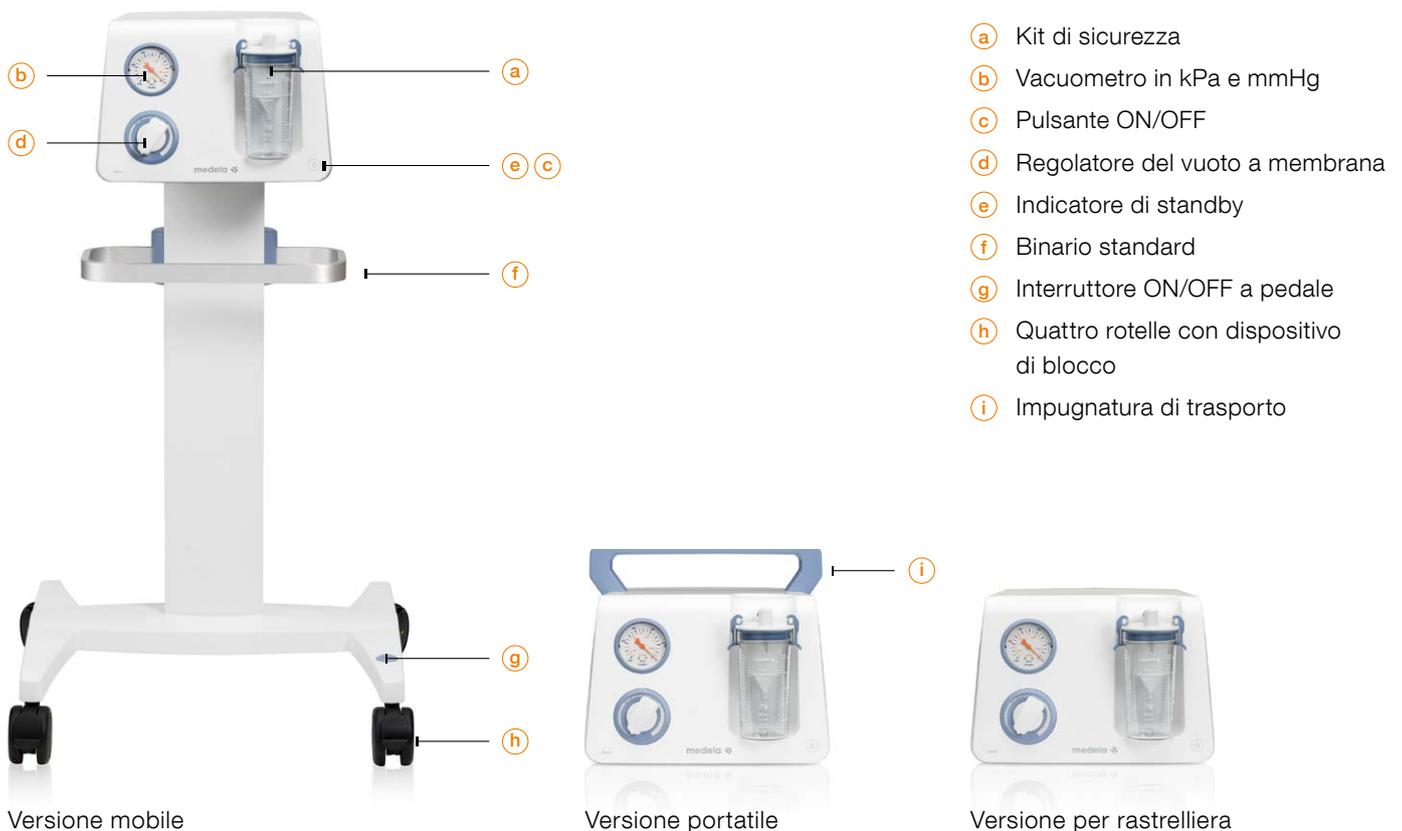

### Affidabilità “Made in Switzerland”

Gli oltre 50 anni di esperienza di Medela nei dispositivi medici a vuoto ci hanno portati ad affinare l'unità di azionamento della pompa di aspirazione Basic. I materiali high-tech termoresistenti dei cilindri permettono un funzionamento affidabile e di lunga durata. Una molla piatta con tecnologia brevettata è solo una delle molte caratteristiche integrate in questa pompa.



Alta qualità, lunga durata dei componenti

### Fattori igienici

Il design liscio e monopezzo della cappa della pompa agevola la pulizia. Sono stati scelti materiali capaci di tollerare disinfettanti potenti. Il pulsante ON/OFF CleanTouch sull'involucro permette di accendere e spegnere la pompa con un semplice tocco: nessun incavo, nessuna scanalatura. L'interruttore ON/OFF a pedale integrato nel carrello lascia le mani libere per l'intervento chirurgico.



Design monopezzo igienico della cappa

### Semplicità sofisticata

La pompa di aspirazione Medela Basic è igienica, affidabile e facile da usare. Il suo regolatore di vuoto a membrana crea il vuoto in pochi secondi, il che rende la pompa di aspirazione Basic adatta per applicazioni che richiedono una rapida aspirazione e un funzionamento silenzioso. La pompa è disponibile in versioni a rastrelliera, portatile e mobile per un collocamento comodo nelle torri di endoscopia, al posto letto del paziente o in sala operatoria. Completate l'unità con il sistema di raccolta fluidi monouso o riutilizzabile dall'ampia gamma di accessori Medela.



Tutti gli elementi di comando si trovano nella parte anteriore della pompa

### Vantaggi

- La pompa di aspirazione Basic è affidabile, igienica e di facile utilizzo.
- Il nostro processo svizzero di sviluppo e produzione offre una precisione meccanica che garantisce prestazioni eccellenti.
- Una struttura semplice e parti interne di facile accesso riducono al minimo lo sforzo durante i controlli di routine.
- Affidabilità attraverso la tecnologia adattata alle esigenze moderne, materiali resistenti, meno parti soggette a usura.
- Una vasta gamma di accessori offre un sistema completo e adattabile alle esigenze individuali.
- Garanzia di 5 anni.

## Accessori

### Sistema di raccolta monouso

Cartucce monouso e contenitori riutilizzabili in policarbonato garantiscono una gestione igienica, semplice ed efficace dei fluidi.

Misure: 1,5 e 2,5 litri.



### Gamma di tubi

In silicone o PVC.



### Sistema di raccolta riutilizzabile

I contenitori e i coperchi in polisulfone trattabili in autoclave consentono la raccolta delle secrezioni in modo semplice ed economico.

Misure: 1, 2, 3 e 5 litri.



### Regolatore del vuoto a pedale per regolazione del vuoto a mani libere

Può essere collegato ai contenitori per aspirazione Medela standard.



### Gamma di filtri

Proteggono la pompa dal traboccamento, proteggono l'ambiente dai batteri e neutralizzano gli odori.



### Interruttore ON/OFF a pedale

Lunghezza del cavo: 3,5 m.



**Affiancate alla vostra pompa Basic gli accessori Medela, per flessibilità e facilità d'uso.**

## Dati tecnici

	Vuoto massimo - 90 kPa - 675 mmHg
	Portata massima 30 l/minuto.
	9,3 kg (versione per rastrelliera)

	A x L x P (versione per rastrelliera) 210 x 305 x 375 mm
	Alimentazione di corrente 100-240 V

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/CEE), IIa Garanzia di 5 anni	
		
		<b>IP21</b>

Tecnologia per il vuoto a uso medico per i professionisti sanitari

**Per informazioni dettagliate, contattateci o contattate il rappresentante Medela locale.**

 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Svizzera  
www.medela.com

### Contatti locali:

Medela Italia Srl  
Via Turrini, 19 - Loc. Bargellino  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Italy  
Phone +39 051 72 76 88  
Fax +39 051 72 76 89  
info@medela.it  
www.medela.it

Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar  
Switzerland  
Phone +41 (0)848 633 352  
Fax +41 (0)41 769 51 00  
contact@medela.ch  
www.medela.ch