

## Raccolta dei fluidi



## SISTEMI DI RACCOLTA MONOUSO E RIUTILIZZABILI



Per la raccolta efficiente e igienica dei fluidi

Precious life – Progressive care

# Sistema di raccolta monouso

## Facile da utilizzare

Il Sistema di Raccolta Monouso di Medela offre un'ampia serie di vantaggi che lo rendono di facile impiego negli ospedali e nelle cliniche. Basta posizionare la sacca nel contenitore e il sistema è pronto all'uso nel giro di pochi secondi. Siccome l'attacco per il vuoto è posto direttamente sul contenitore, la sacca può essere comodamente rimossa e sostituita senza disconnettere l'attacco per il vuoto. Il gancio di chiusura tiene il contenitore stabilmente in posizione e facilita la rimozione della sacca con una mano sola. Se si devono aspirare grandi quantità di fluido, il sistema può essere impiegato in serie o con valvola di commutazione. I requisiti logistici sono limitati, grazie a sacche di due sole dimensioni, da 1,5l e da 2,5l.

## Igienico

Il sistema offre un filtro antitraboccamento/antibatterico integrato in ogni sacca, con un pre-filtro supplementare per prevenire l'ostruzione prematura dovuta a fumo o particelle, nonché una valvola antireflusso per impedire alle secrezioni di risalire verso il paziente e ridurre la formazione di schiuma e gli spruzzi. La sacca è realizzata con un doppio strato per una lunga durata e controllo degli odori. Una caratteristica speciale è il sacchetto che mantiene il solidificante all'interno finché la sacca è in uso, evitando così perdite e inconvenienti per il personale.

## I contenitori e le sacche con o senza solidificante sono contrassegnati da colori

I colori distinti evitano confusione: sacca arancio in contenitore arancio; sacca gialla in contenitore giallo.



Sacca di aspirazione e contenitore da 1,5l



Sacca di aspirazione e contenitore da 2,5l



- (a) Un solo attacco per il tubo per il vuoto sul contenitore
- (b) Gancio di chiusura sul contenitore per fissarlo al supporto
- (c) Valvola antireflusso con navigazione del fluido
- (d) Filtro antibatterico con paraspruzzi per la protezione dal traboccamento
- (e) Terza apertura per il collegamento in serie
- (f) Maniglie per destorsi e mancini
- (g) L'elemento angolato impedisce di piegare il tubo paziente
- (h) Alloggio per filtro con pre-filtro e filtro antitraboccamento/antibatterico

### In breve

- Facile da impostare e pronto all'uso in pochi secondi.
- La sacca può essere rimossa dal contenitore indipendentemente dal tubo per il vuoto.
- Filtro di protezione dai batteri e dal traboccamento presente in ogni sacca. Il pre-filtro impedisce l'ostruzione prematura dovuta a particelle o fumo da elettrocauterizzazione.
- La valvola antireflusso impedisce alle secrezioni aspirate di risalire verso il paziente. La navigazione del fluido riduce la formazione di schiuma.
- Il collegamento in serie consente di aspirare grandi quantità di fluido.
- Il sacchetto mantiene il solidificante all'interno finché la sacca è in uso.
- 1,5l e 2,5l per facilitare la conservazione e gli aspetti logistici.

## Sistema di raccolta riutilizzabile

### Facilità di gestione

Il Sistema di Raccolta Riutilizzabile di Medela è composto da parti robuste, di elevata qualità e lunga durata. Per i clienti che preferiscono un sistema riutilizzabile, il sistema Medela facilita la raccolta dei fluidi aspirati. È composto da vari contenitori e coperchi autoclavabili in PSU con protezione integrata anti traboccamento. Un grande vantaggio è che il coperchio di tutti e quattro i contenitori – da 1, 2, 3 e 5 litri – ha le stesse dimensioni, cosa che facilita la gestione e riduce la logistica.

### Utilizzo flessibile

Grazie alla nostra vasta esperienza nella Tecnologia Medica per il Vuoto, progettiamo e produciamo pompe di aspirazione, sistemi di raccolta dei fluidi e accessori per rispondere a un'ampia gamma di impostazioni cliniche e applicazioni differenti. Se avete bisogno di un sistema completo o se cercate un componente specifico, siamo a disposizione per consigliarvi.



Contenitori riutilizzabili da 1, 2, 3, e 5 litri

- (a) + (b) Attacchi paziente (a) e vuoto (b) chiaramente distinti
- (c) Protezione meccanica contro il traboccamento
- (d) Scala graduata chiaramente visibile

### In breve

- Sistema flessibile con componenti e accessori multipli per soddisfare ogni esigenza.
- Contenitori realizzati in polisulfone di grado elevato, resistente agli urti.
- I contenitori in polisulfone sono adatti a tutti i normali processi di disinfezione e sterilizzazione.
- La scala graduata di facile lettura indica il volume del fluido.
- I coperchi uniformi per i contenitori di tutte le dimensioni sono prodotti in poliammide rinforzata con chiusura ermetica in gomma santoprene.
- Protezione meccanica anti traboccamento integrata nel coperchio.

## Accessori

Sia che scegliate un Sistema di Raccolta Riutilizzabile, sia che optiate per un Sistema Monouso, i prodotti Medela permettono una gestione dei fluidi igienica, semplice ed economica. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di accessori per soddisfare le singole necessità e le diverse applicazioni di aspirazione.

### Contenitori sterilizzabili in autoclave 0,25 / 0,5 l (PSU)

per piccole quantità di fluidi aspirati.



### Coppa per campioni monouso

si può collegare con facilità all'attacco paziente per raccogliere campioni di tessuto.



### Carrello

per l'utilizzo mobile dei sistemi di raccolta dei fluidi e degli accessori.




### Filtri monouso

proteggono la pompa dal traboccamento, proteggono l'ambiente dai batteri e neutralizzano gli odori.



### Portastaffa / staffa da muro

per agganciare i contenitori e altri accessori in modo rapido e sicuro alle guide standard o alle pareti.

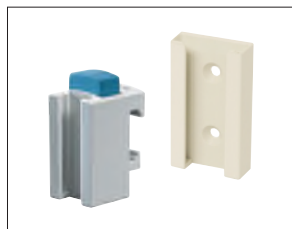


### Tubi

in silicone o PVC con possibilità di scegliere gli attacchi.




### Collegamento in serie

per l'aspirazione di grandi volumi di fluido. Passaggio automatico da una sacca all'altra.

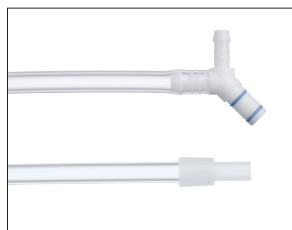

### Valvola di commutazione con morsetto

per l'aspirazione di grandi volumi di fluido. Passaggio manuale da una sacca o contenitore all'altro.

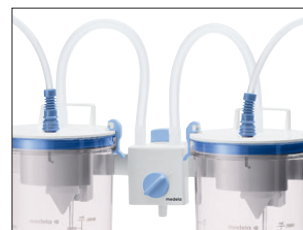

CE 0123

Tecnologia per il vuoto medicale per i professionisti della salute

Per informazioni dettagliate, contattateci o contattate il rappresentante Medela locale.

 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Svizzera  
www.medela.com

**Italia**  
Medela Italia Srl  
Via Turrini, 13/15 – Loc. Bargellino  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Italia  
Telefono +39 051 72 76 88  
Fax +39 051 72 76 89  
info@medela.it  
www.medela.it

**Switzerland**  
Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar  
Switzerland  
Phone +41 (0)848 633 352  
Fax +41 (0)41 769 51 00  
contact@medela.ch  
www.medela.ch

Contatti locali: